


1. Collet
2. Poignée
3. Patte de serrage
4. Plaquettes d'ancrage
5. Appui sur le bol

Installation

- 1) Retirez le siège de toilette actuel.
- 2) Assurez-vous que pattes de serrage (3) sont complètement dévissées.
- 3) Disposez les plaquettes d'ancrage (4) de l'accoureur de sécurité de luxe pour toilette sur les trous de fixation du siège de toilette actuel.
- 4) Si vous n'utilisez pas un dispositif de surélévation, placez directement le siège de toilette sur les plaquettes d'ancrage (4) et fixez-le à l'aide de nouvelles attaches.
- 5) Resserrez également les pattes de serrage (3) de part et d'autre du bol de toilette.
- 6) Retirez les collets (1) et disposez les poignées (2) (en vous assurant de les installer du bon côté) à la hauteur souhaitée, puis remplacez les collets (1).

Remarque

Vérifiez de temps à autre les collets (1) et les pattes de serrage (3) afin de vous assurer que rien n'a bougé.

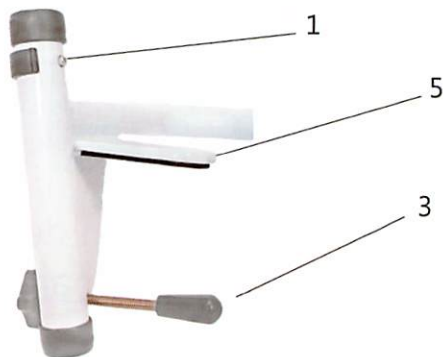



1. Collar
2. Manija
3. Lengüeta de fijación
4. Placas de anclaje
5. Apoyo en la taza

Installation

- 1) Remove existing toilet seat.
- 2) Make sure tension knobs (3) are fully unscrewed.
- 3) Place Ultimate Toilet Safety attachment plate (4) over the existing holes on back of toilet.
- 4) If not using toilet seat riser, place toilet seat cover over attachment plate (4) and secure with new hardware.
- 5) Tighten tension knobs (3) *equally* on both sides of the toilet bowl.
- 6) Remove C-clips (1) and place hand supports (2) (making sure they are installed on correct sides {left and right}), to desired height and replace C-clips (1) back.

Note

Inspect the C-clips (1) and tension knobs (3) periodically to ensure they have not loosened.

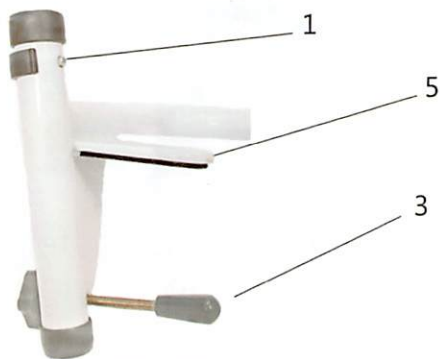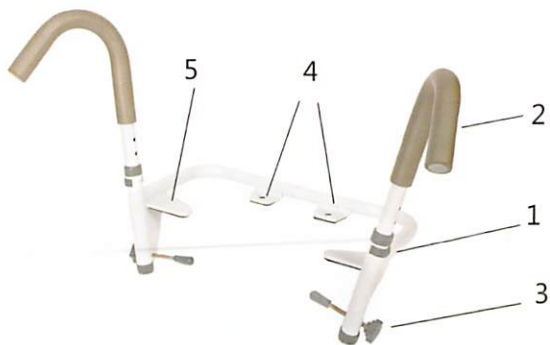

1. C-clip
2. Hand support
3. Tension Knob
4. Ultimate Frame attachment plates
5. Bowl support

Instalación

- 1) Retire el asiento de inodoro existente.
- 2) Asegúrese de que las lengüetas de fijación (3) son completamente destornilladas.
- 3) Coloque las placas de anclaje (4) del aseo de seguridad de lujo para inodoro en los agujeros de montaje del asiento de inodoro existente.
- 4) Si no utiliza un dispositivo de elevación, coloque directamente el asiento del inodoro sobre las placas de anclaje (4) y fíjelo con fijaciones nuevas.
- 5) Apriete también las lengüetas de fijación (3) a ambos lados de la taza del inodoro.
- 6) Retire los collares (1) y coloque las manijas (2) (asegurándose de instalarlas al buen lado) a la altura deseada, y vuelva a colocar los collares (1).

Nota

Compruebe los collares (1) y las lengüetas de fijación (3) de vez en cuando para asegurarse de que nada se ha movido.



The Ultimate Toilet Safety Frame Installation Guide

116A Viceroy Road, units 5 and 6
Concord (Ontario) L4K 2M1
(905) 669-0348 o sin gastos 1-800-238-7190