

Use

1. Apply the brake to the chair!
2. Turn the foot rests away.
3. If necessary, fold the armrests up.
4. Support the less able person when they are taking a seat.
5. Shut the armrests and let the client's feet rest on the foot plates.


Stand up by carrying out the same procedure in reverse order.

Wheel blocking



1. Wheel blocking.
2. Unlocking.

Directional / braked wheel

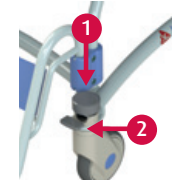


1. Wheel blocking.
2. Unlocking.

Foot rest



Both foot plates must be turned away for the less able person to take a seat in the chair. Make sure that the person places both feet on the foot plates when the chair is moving.

Armrest

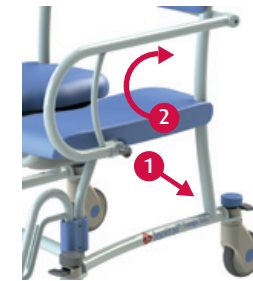

1. Unlocking.
2. Turn backwards.

Close by following same process in reverse order.

Toilet function

- Remove the lid on the seat before the person sits down in the chair.
- *In combination with toilet:* The Tango XXL can be moved over almost every toilet.
- *With bedpan:* The Tango XXL can also be used as a toilet chair. Simply slide the stainless steel / plastic bedpan under the chair using the guides.

Cleaning and maintenance

The Tango XXL must be cleaned after every use, with water and regular household cleaning agents. Do not use any abrasive or other aggressive cleaning products. Check the wheels regularly for hairs, dust and soap residues and remove when necessary.

Safety recommendations

- Read the Instructions for use carefully (found at: www.lopital.com) before use.
- Maximum load 300kg.
- Make sure that the brake is applied to the chair when transferring clients to and from the chair.
- Place both feet on the foot supports.

Important!

This instruction card may not be considered a replacement for the Instructions for use.



Gebrauch

1. Arretieren Sie den Stuhl!
2. Drehen Sie die Fußstützen weg.
3. Klappen Sie die Armlehnen bei Bedarf hoch.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.


Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung



1. Rollenblockierung.
2. Entriegeln.

Lenkrolle / Rolle mit Feststellbremse

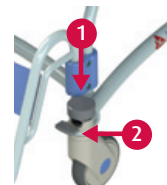


1. Rollenblockierung.
2. Entriegeln.

Fußstütze



Beide Fußstützen müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne

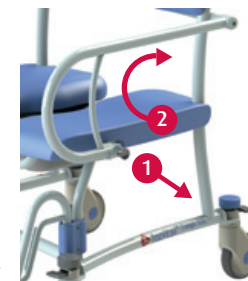

1. Entriegeln.
2. Nach hinten drehen.

Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl Platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Tango XXL Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden.
- *Mit Behälterführung:* Der Tango XXL Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoff-Behälter unter den Stuhl.

Reinigung und Wartung

Der Tango XXL Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf.

Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 300kg.
- Achten Sie darauf, dass die Feststellbremsen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.

Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.